

# BIOCREDIT COVID-19 Ag


## SARS-CoV 2 Тест на антиген

- » Первая в мире коммерциализация технологии частиц черного золота (высокая чувствительность и специфичность)
- » Удобная двухцветная система (линия управления: красная, тестовая линия: черная)
- » Время быстрой проверки (5 - 8 мин)
- » Простое обнаружение антигена SARS-CoV2

### Основная технология Black Gold Particle



Дифференцированная технология конъюгирования черного золота

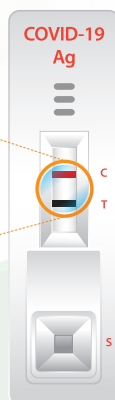

Двухцветная система

8 минут!



YouTube **BIOCREDIT COVID-19**



## BIOCREDIT COVID-19 Ag набор для экспресс тестов

Назначение	обнаружение антигенов SARS-CoV2
Упаковка	20 тестов
Хранение	при 1-40°C
Материал	мазок из носоглотки
Shelf life	24 месяцев от даты изготовления
Результат через	5-8 минут


# COVID-19 Rapid Diagnostic Test

## ПРОЦЕДУРА


Вставьте образец тампона и покрутите тампон. 5-10 раз.




Удалите тампон, осторожно сжимая головку тампона.

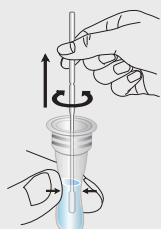


Надежно закройте пробирку с разбавителем для анализа крышкой фильтра.

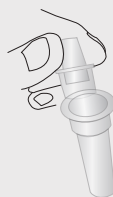

Переверните пробирку с разбавителем для анализа и осторожно сожмите ее, чтобы набрать 3-4 капли (90-150 °) в лунку для образца на приборе.

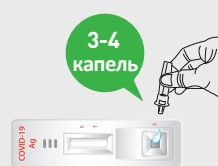

Проверьте результат в течение 5-8 минут.

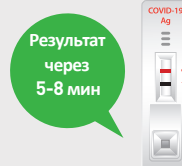

## РЕЗУЛЬТАТЫ

### НЕГАТИВНЫЙ




Одна **красная** линия "С" в окне результатов.

### ПОЗИТИВНЫЙ



Две полосы, **черная** "Т" тестовая линия и **красная** контрольная линия "С" в окне результатов.

### НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ

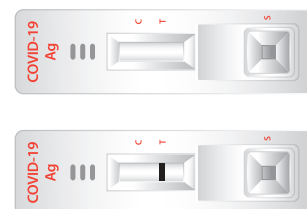

В окне результатов нет линии "С".  
Рекомендуется провести повторное тестирование образца..

